



Oasis Series

# Y6w

## CAMA ELÉCTRICA DE 3 FUNÇÕES

Código de registro: SKD-C



**SAIKANG** Medical

Sua vida mais  
saudável

## Y6w

### RECURSOS E DESTAQUES

#### Parâmetros técnicos



▪ Tamanho Externo (CxLxA):	2130x1015 mm
▪ Plataforma de colchão:	1925x880 mm
▪ Carga de trabalho segura:	250 kg
▪ Ajuste de altura:	365-805 mm
▪ Ajuste do encosto:	0-75° (±10°)
▪ Ajuste do joelho:	0-35° (±10°)
▪ Extensão da cama:	200mm
▪ Auto-regressão:	100+60mm
▪ Tensão e frequência:	100-240 V · 50/60 Hz
▪ Conecte conforme necessário (grau hospitalar)	

#### Configuração técnica

<input checked="" type="checkbox"/> Motor Linear	3pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Rodas de 5" de cobertura com travão	4pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Trilhos laterais dobrável com Cabo ProErgo - pega	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Extremidades da cama ABS Oasis com bloqueio seguro	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Cama hospitalar de plataforma PP, removível e lavável	9pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Ø100mm Roda de para-choques de parede	4pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Suporte para soro	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Previsão de suporte para soro	4pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Gancho de drenagem	2pcs
<input checked="" type="checkbox"/> ABS Colchão Rolha	2pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Controlador manual	1pc


#### Recursos opcionais

<input type="checkbox"/> RCP manual	
<input type="checkbox"/> RCP elétrico	
<input type="checkbox"/> Extensão da cama 200mm	
<input type="checkbox"/> Bateria de apoio	
<input type="checkbox"/> Painel de Controlo de Enfermeiros	
<input type="checkbox"/> Botão de paragem de emergência	
<input type="checkbox"/> Função das rodas direcionais	
<input type="checkbox"/> Polo Monkey	
<input type="checkbox"/> Moldura Balcânica	

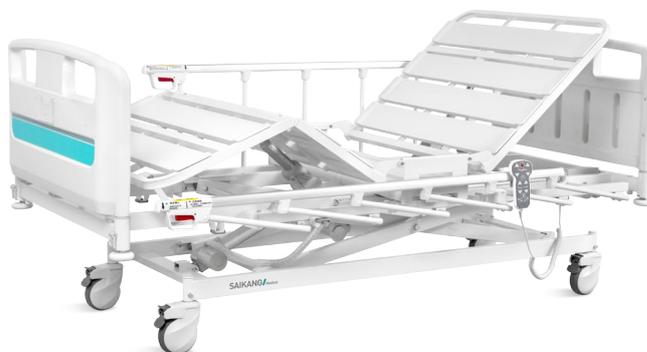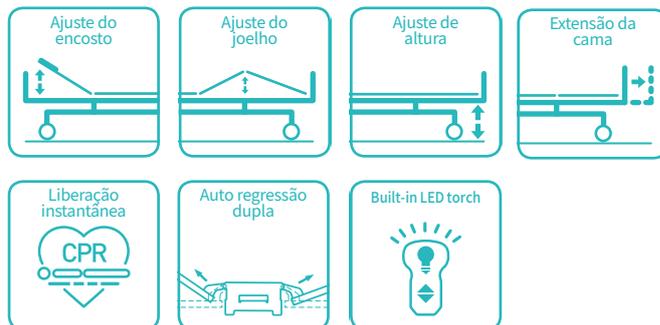

**Função de regressão dupla**

Auto-regressão 10 + 6 cm ao reposicionar o encosto e o apoio da coxa, o Y8y faz o encosto recuar 10 cm e o encosto 6 cm de forma a minimizar a pressão na região pélvica do paciente. Isso resulta em uma redução significativa na o desenvolvimento de úlceras de pressão.

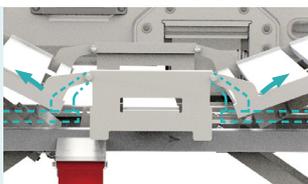**Motor elétrico**

Motor linear, com padrão UL / ROHS / EN. Ruído abaixo de 50 dB, com movimento vitalício 20.000 vezes.

**Plástico**

Plástico ambiental pode ser esterilizado em 100°C, tração até 30MPa

**Aço/Pintura**

11 Pintura epóxi de processo, teste ASTM antibacteriano, espessura da tinta 0,12mm, brilho 60°, tinta pode resistir ao impacto de 50kg

**Soldagem / Chassis**

Robótica Panasonic assegura 360° soldadura lisa completa.

**Placa da cabeceira e dos pés**

Design patenteado Cabeceira e rodapé, usando a estrutura de bloqueio excêntrica, um passo rápido removível.

**Grades de proteção de segurança**

Grades de proteção dobrável em forma de L (Patente), com tubo dobrado, instalação sólida, sem tremura, anti-belisção, proteger a segurança do paciente.

**Rodas**

Rodas com pneu TPR, sem desgaste após rodar 30KM, unidas formando um passe sem parafusos. Teste dinâmico do passe: Rolamento 120kg correr 30KM e passar obstáculos 500 vezes 500 vezes.

**TECNOLOGIA LIVRE DE ARTICULAÇÃO**

Capas plásticas removíveis formadas a partir de 9 lamella moldada de sopro removível para minimizar as ranhuras onde infecções indesejadas podem se esconder.

**Extensão**

Plataforma da cama alargada até 20 CM, confortável para os pacientes mais altos (opção).

**Porta-colchão**

Colchão antibacteriano à prova d'água.

**Rodas de amortecedores**

Amortecedores de canto horizontais na periferia externa da cama para proteger a cama e a parede.

**Soporte para soro**

Coluna de aço inoxidável com plástico gancho.

**Gancho de drenagem**

Gancho de drenagem de plástico, móvel.





## CONSTANTE INOVAÇÃO



Desenho



Pesquisa



Fabricação



Manutenção



Serviço



## FILIAIS EM TODO MUNDO

### USA

**Saikang Medical Technology, Inc.**  
17800 Castleton St Ste 180,  
City of Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

### United Kingdom

**UK Healthward International Ltd.**  
Dept. 111, 196 High Road Wood  
Green, N22 8HH, London.  
Tel.: +44 2032399738

### Russia

**Saikang Medical Russia LLC**  
Truda 174,  
454080 Chelyabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

### East Africa

**Saikang Medical Solutions Ltd.**  
Viraj Complex Unit 3, Mombasa  
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenya.  
Tel.: +254 733 704 690

### Middle East

**Saikang Medical Supplies LLC**  
X22-S03 England Cluster,  
International City, Dubai.  
United Arab Emirates.  
Tel.: +20 128 8962497

# SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 📞 24/7

✉ sales@chinasaikang.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue