



Oasis Series

Y6y8c

Cama Eléctrica
SKD-C



SAIKANG / Medical


MARCA LÍDER DE CHINA EN MOBILIARIO MÉDICO
Código de valores: 870098

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

FÁCIL MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE

Respetar la fácil movilización del paciente:

Un botón para la posición de movilización del paciente - placa de apoyo levantada, doble orificio en el guarda-cuerpo de la parte trasera, que soporta al paciente de pie

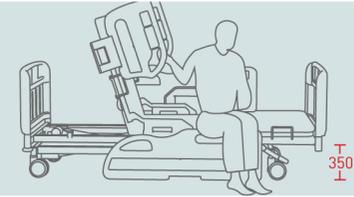


BARANDILLA DE SEGURIDAD

La barandilla diseñada totalmente considerada para proporcionar suficiente espacio y apretón de manos para el paciente salir de la cama y proporcionar seguridad extremadamente alta. Sistema de desbloqueo, para evitar que los pacientes bajen accidentalmente la rejilla de protección (diseño patentado).

REGRESIÓN AUTOMÁTICA

Regresión automática 10 + 6 cm Al reposicionar el respaldo y el descanso para los muslos, el Y8Y8C retira la placa trasera en 10cm y la placa del muslo se retira en 6cm para minimizar las fuerzas de presión y cizallamiento en la región pélvica del paciente. Esto resulta de úlceras de presión

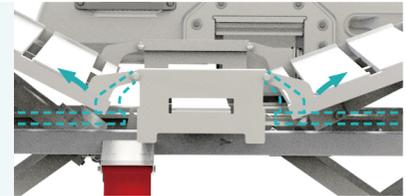

EN60601

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD


Siga la norma de seguridad EN 60601.

Interruptor de parada de emergencia de un botón puede detener rápidamente todos los movimientos.

MANUAL DE RCP/RCP ELÉCTRICO

Alza de reinicio de emergencia de RCP para aplanar inmediatamente la parte posterior de la cama; situado a ambos lados de la cama.

El botón CPR eléctrico se coloca dentro del panel de control y del panel de control de la enfermera, un botón para hacer que la placa posterior esté plana.

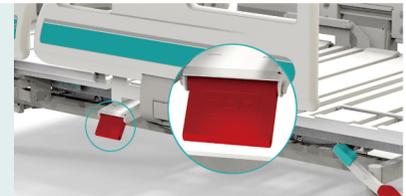

10,000_{times}

SISTEMA DE FRENADO

Sistema de frenado de tres posiciones, el transporte puede mantener una línea recta.

SISTEMA ELÉCTRICO DE CONFIANZA

Motor americano, con aprobación UL / ROHS / EN. Ruido debajo de 50dB, con movimiento de 20.000t.



UL / ROHS / EN

50 | 20,000_{times}




POSICIÓN DE 30 GRADOS

Resto 30 - posición de 30 grados - ayuda a la enfermera a observar la posición de la cama a distancia, muchas investigaciones muestran que la posición de 30 grados será el máximo. reducir la posibilidad de infección pulmonar.

Partes Ricas



Ruedas con neumático TPR, sin desgaste después de 30KM, formando unidas sin tornillos - Prueba dinámica de pase: rodamiento de 120kg con 30KM y pasar los obstáculos 500m.

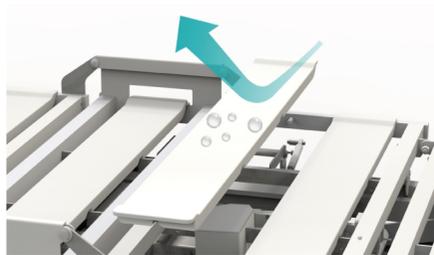


TECNOLOGÍA CONJUNTA Cubiertas plásticas removibles formadas por 9 láminas moldeadas por soplado extraíbles para minimizar las ranuras donde las infecciones indeseables pueden esconderse.



Indicador de ángulo de patente, muestre claramente la posición de reposo y tredelenbug.



Diseño patentado Cabezal desmontable para los pies, utilizando la estructura de bloqueo excéntrico, un paso rápido extraíble.

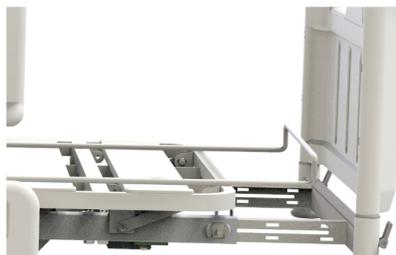

plataforma de lecho ampliado hasta 20 cm, cómodo para el más alto de los pacientes (opción)



Soporte para colchón. Colchón impermeable, antibacteriano



Amortiguadores de canto horizontales en la periferia externa de la cama para proteger la cama y la pared.



5º y 6º trilha lateral extra, para 100% de protección total



Soket en el trilha lateral para colocar el celular del paciente o gafas



Gancho de drenaje de plástico, móvil



Bastón completo de SS IV con 5 kg

CONCEPTO DE DISEÑO



Paciente

Ergoframe® contra las úlceras de presión
Movilización fácil
Disponible con varios controles



Personal

Función de caída suave
Concepto limpio fácil
Recursos de seguridad, como el extensor o protector



Gestión


TCO bajo - costo total de propiedad
Cama Universal por un precio bajo
Protección de sobrecarga



Ajuste del respaldo




Ajuste del amortiguador

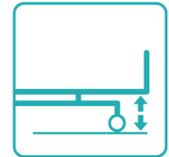


Ajuste de altura



Resucitación cardiopulmonar

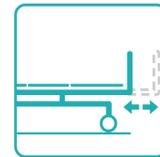

Extensión del lecho

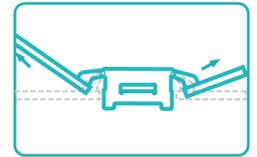

Autorregresión

Parámetros Técnicos

Dimensiones de la cama	2130*1050*350-800mm
Plataforma de la cama	1925*900mm
Respaldo	0-75°(±10°)
Soporte para piernas	0-35°(±10°)
Tamaño del colchón	1925*880*10mm
Bumper Wheel	4*Φ80mm
Rueda de parachoques	2120*1080*450mm

Configuración Técnica

Motor Americano	4pcs
Ruedas de 5", doble dirección	4pcs
Altura adicional de barandilla lateral Oasis del ABS	1set
Piecero Oasis del ABS con cierre de seguridad	1set
Rueda de parachoques de pared de Φ80mm	4pcs
Soporte de Gotero	1set
Sujeción de soporte de gotero	4pcs
Accesorio para bolsas de orina	2pcs
Pedal de bloqueo central	1pc





INNOVACIÓN SAIKANG

MARCA LÍDER DE CHINA EN MOBILIARIO MÉDICO



Innovación en Diseño



Innovación en Investigación



Innovación en Fabricación



Innovación en Mantenimiento



Innovación en Servicio

JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

24 horas.: 0086-18021231901 
www.chinasaikang.com

SAIKANG (Sede de China)

Carretera No.35 Lehong, Ciudad de Zhangjiagang, Provincia de Jiangsu, China.
TEL: + 86-512-58525850
FAX: + 86-512-58520713
Correo electrónico: inquiry@jssaikang.com

SAIKANG (Sucursal del EE.UU)

Saikang Tecnología Médica, Inc
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de la Industria, Ca 91748,
Teléfono: +1 949648-2776.

SAIKANG (Sucursal del Reino Unido)

Reino Unido División de Salud Internacional Limitada. Propietario (s) Dirección DEPTO 111, 196 Carretera Wood Green, Londres, N22 8HH Reino Unido
TEL: +44 2032399738

SAIKANG (Sucursal del África Oriental)

Saikang Soluciones Médicas (África Oriental) Ltd. Complejo Viraj Unidad 3 Carretera Mombasa, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
TEL: +254 733-704 690

SAIKANG (Sucursal de Oriente Medio)

Saikang Suplementos Médicos (Oriente Medio) LLC X22-S03 Inglaterra Cluster, Ciudad Internacional, Dubai UAE.
TEL: +20 128 8962497



Gira por la Fábrica



Catálogo de Descarga