



Oasis Series

Y6y8c

Cama Eléctrica
SKD-C



SAIKANG / Medical



LEADING BRAND OF CHINA MEDICAL FURNITURE
Stock Code: 870098

Controle de Qualidade

FACILIDADE MOBILIZAÇÃO DO PACIENTE

Prioridade a facilidade de mobilização do paciente:

Um botão para a posição de mobilização do paciente -placa traseira levantada, design de orifício duplo no trilho de proteção da parte traseira, que suporta a auto-posição do paciente.

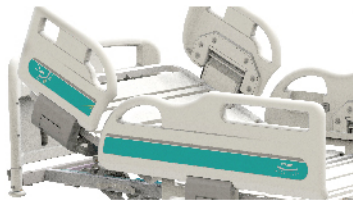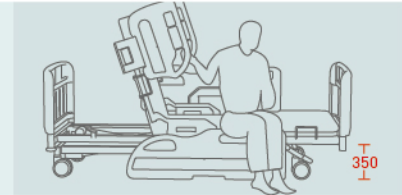


GRADES DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA

Grades de proteção dobrável em forma de L (Patente), com tubo dobrado, instalação sólida, sem tremura, anti-belisção, proteger a segurança do paciente.

REGRESSÃO AUTOMÁTICA

Regressão automática 10+6 cm

Ao reposicionar o encosto e o repouso do joelho o Y6Y8C faz a placa traseira recuar 10cm e a placa do joelho recua 6cm para minimizar a pressão e as forças de corte na região pélvica do paciente. Isso resulta em uma redução significativa no desenvolvimento de úlceras de pressão.

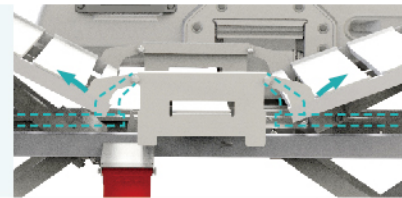

PADRÃO DE SEGURANÇA


Siga o padrão de segurança IEC60601

Um botão de paragem de interruptor de emergência que pode parar rapidamente todo o movimento.

MANUAL DE RCP | CPR ELÉTRICO

Cabo de reposição de emergência de RCP para aplatar imediatamente a parte traseira da cama; localizado em ambos os lados da cama.

O botão de RCP elétrico é instalado no interior do painel de controlo e do painel de controlo de enfermeira, um botão para tornar a placa traseira plana.

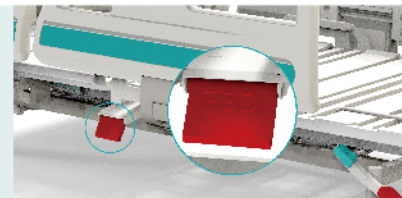

PAINEL DE CONTROLO DE ENFERMEIRA | CONTROLADOR PORTÁTIL

Painel de controlo por satélite para enfermeira: cabo espiral flexível para uma mobilidade fácil e funcionamento em posição ideal. A enfermeira pode controlar todas as funções padrão e a posição da cadeira automática. Este painel é um acessório opcional.

Controlador portátil para pacientes e enfermeiras, design ergonómico. Tocha LED incorporada, design de teclado retroiluminado para uso noturno.

SISTEMA ELÉTRICO CONFIÁVEL

Motor americano, com aprovação UL/ROHS/EN. Ruído abaixo de 50dB, com movimento de 20.000 vezes.



ENCOSTO 30° POSIÇÃO


Ajude a enfermeira a observar a posição da cama à distância, muitas pesquisas mostram que a posição de 30° reduzirá a chance de infeção pulmonar.

Partes Ricas



Rodas com pneu TPR, sem desgaste após correr 30KM, unidos formando-se sem parafusos

Teste dinâmico do passe: Rolamento 120kg correr 30KM e passar obstáculos 500 vezes.

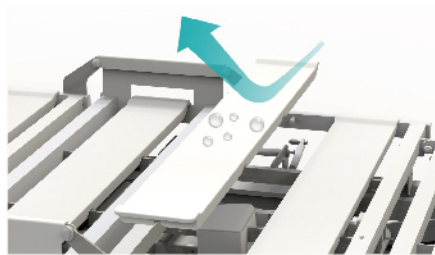

TECNOLOGIA LIVRE DE ARTICULAÇÃO


Capas plásticas removíveis formadas a partir de 9 lamella moldada de sopro removível para minimizar as ranhuras onde infecções indesejadas podem se esconder.



Indicador de ângulo de patente, mostrar claramente o encosto.



Design patenteado Cabeceira e placa do pé, usando a estrutura de bloqueio excêntrica, um passo rápido removível.

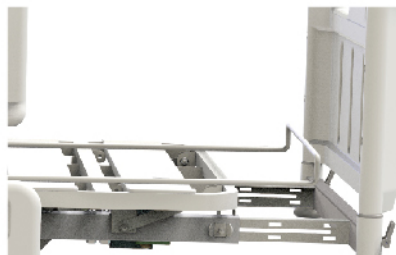

Plataforma da cama alargada até 20 CM, confortável para os pacientes mais altos (opção).



Tomada no trilho lateral para colocar o telemóvel ou óculos do paciente.



Amortecedores de canto horizontais na periferia externa da cama para proteger a cama e a parede.



5º e 6º trilho lateral extra, para proteção 100% total (opção).



Suporte para soro SS completo, com 5kg.



Gancho de drenagem de plástico, móvel.

CONCEITO DE DESENHO



Paciente

Ergoframe® contra úlceras de pressão
Mobilização fácil
"Disponível com uma série de controles"



Equipe

Função de queda suave
Conceito fácil de limpar
"Recursos de segurança, como o Extensor ou Protetor"



Gerenciamento

Baixo TCO – custo total de propriedade
Cama universal por um preço baixo
Proteção contra sobrecarga



Ajustamento de encosto



Ajustamento do descanso do joelho




Ajustamento de altura



Reanimação cardiopulmonar



Extensão da cama

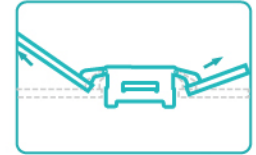

Regressão automática




Contorno automático

Pârametros Técnicos

Dimensões da cama L*W*H	2130*1050*350-800mm
Plataforma de cama	1925*900mm
Encosto	0-75°(±10°)
Apoio para pernas	0-35°(±10°)
Tamanho do colchão	1925*880*10mm
Roda de pára-choques	4*Φ80mm
Tamanho da embalagem	2120*1080*450mm

Configurações Técnicas

Motor americano	3pcs
Rodas de 5" laterais e duplos, com sistema de bloqueio central	4pcs
Trilhos laterais de ABS Oasis com Altura extra	1conjunto
Extremidades da cama ABS Oasis com bloqueio seguro	1conjunto
φ80mm Roda de para-choques de parede	4pcs
Suporte para soro	1conjunto
Previsão de suporte para soro	4pcs
Gancho de drenagem	2pcs
Pedal de bloqueio central	1pc

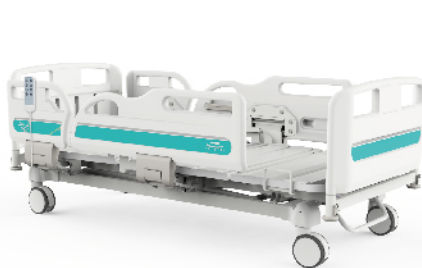



INOVAÇÃO DA SAIKANG

MARCA LÍDER DA CHINA MÓVEIS MÉDICOS



Inovação em desenho



Inovação de pesquisa



Inovação de fabricação



Inovação de Manutenção



Inovação de serviço

JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

24hrs: 0086-18021231901 
www.saikangmedical.com

SAIKANG (China Headquarter)

No.35 Lehong Road,Zhangjiagang City,
Jiangsu Province,China.
TEL: +86-512-58525850
FAX: +86-512-58520713
E-mail: inquiry@jssaikang.com

SAIKANG (USA Branch)

Saikang Medical Technology, Inc
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, Ca 91748
Tel: +1 949648-2776

SAIKANG (UK Branch)

Uk Healthward International Limited
Owner(s) Address DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +44 2032399738

SAIKANG (East Africa Branch)

Saikang Medical Solutions (East Africa) Ltd.
Viraj Complex Unit 3 Mombasa Road,
P.O Box 14262-00800, Nairobi.
TEL: +254 733-704 690

SAIKANG (Mid East Branch)

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai UAE
TEL: +20 128 8962497



Contacto



website

Conforme a circunstância da impressão, as fotos podem ter pequena diferença na cor, tátil de produtos reais.
Conforme a atualização do design e a melhoria, os parâmetros e a perspectiva dos produtos podem mudar,
obrigado pela compreensão.