



Grace Care series

# D8d

## CAMA ELÉTRICA COM 5 FUNÇÕES

Código de registro: SKD-C




**SAIKANG** Medical

Sua vida mais  
saudável

# D8d

## RECURSOS E DESTAQUES

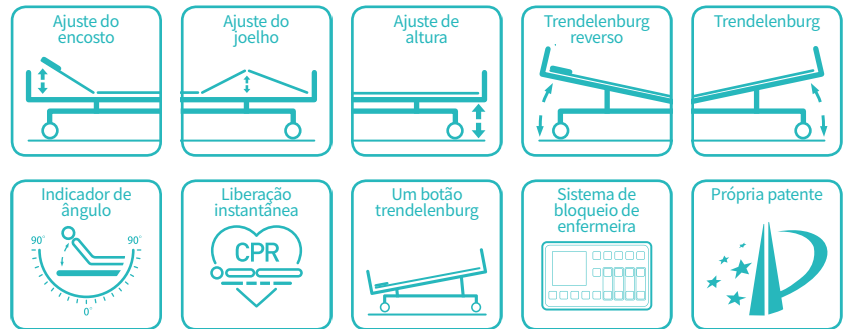

### Parâmetros Técnicos

▪ Tamanho Externo (CxL):	2280x1090 mm
▪ Plataforma de colchão:	1925x900 mm
▪ Carga de trabalho segura:	250 kg
▪ Ajuste de altura:	435-725 mm
▪ Ajuste de repouso traseiro:	0-75° (±10°)
▪ Ajuste de descanso do joelho:	0-35° (±10°)
▪ Reverso Trendelenburg	0-12°
▪ Trendelenburg:	0-12°
▪ Indicador de ângulo:	0-90°
▪ Tensão e frequência:	100-240 V · 50/60 Hz
▪ Conecte conforme necessário (grau hospitalar)	



### Configuração Técnica

<input checked="" type="checkbox"/> RCP Manual	
<input checked="" type="checkbox"/> Um botão de paragem	
<input checked="" type="checkbox"/> Um botão trendelenburg	
<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de bloqueio de enfermeira	
<input checked="" type="checkbox"/> Indicador de ângulo para ajuste do encosto e posição trendelenburg	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Linear	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Rodas de 5" de dois lados de Segurança com bloqueio Centralizado	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Trilhos laterais de ABS Grace com Painel de Controlo Integrado	1 conjunto
<input checked="" type="checkbox"/> Extremidades da Cama ABS Grace com Painel de Controlo LCD Integrado	1 conjunto
<input checked="" type="checkbox"/> φ85mm Roda de para-choques de parede	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Soquete trapézio	2 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Suporte para soro	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Previsão de Suporte para soro	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Gancho de drenagem	2 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Pedal de bloqueio central	2 pcs.

### Recursos opcionais

<input type="checkbox"/> RCP eléctrico	
<input type="checkbox"/> Sistema de pesagem com tela LCD	
<input type="checkbox"/> Extensão de cama 200mm	
<input type="checkbox"/> Bateria de reserva	
<input type="checkbox"/> Posição Cardíaca	
<input type="checkbox"/> Superfície da cama ABS	
<input type="checkbox"/> Superfície de cama de Raio-X	
<input type="checkbox"/> Polo Monkey	
<input type="checkbox"/> Moldura Balcânica de Tração	
<input type="checkbox"/> Função de rodas direcionais	
<input type="checkbox"/> Colchão de espuma básica 12 cm de espessura	
<input type="checkbox"/> Colchão de espuma anti-decúbito 14 cm de espessura	
<input type="checkbox"/> Suporte vertical de oxigênio	
<input type="checkbox"/> Poste de levantamento de braço único	
<input type="checkbox"/> Prateleira de utilidades	

**Cabeça e estribo**

A altura da cabeça e pé placa são extra longo com design de curva cercada, fornecer sensação reconfortante para pacientes.

**Superfície da cama**

Plataforma de estampagem, superfície lisa sem risco de soldadura, carregando carga de 250KG. Plataforma ABS de opção e plataforma translúcida de raios-X

**Soldagem / Chassis**

Robótica Panasonic assegura 360° soldadura lisa completa. Base de cama sólida feita de placa rotativa estampada de 5,0mm.

**Motor Linear**

Motor linear, com padrão UL / ROHS / EN. Ruído abaixo de 50 dB, com movimento vitalício 20.000 vezes.

**Aço / Pintura**

Baosteel® da fortuna global 500 empresa.  
11 Pintura epóxi de processo, teste ASTM antibacteriano, espessura da tinta 0,12mm, brilho 60°, tinta pode resistir ao impacto de 50kg.

**ABS virgem**

Plástico ambiental pode ser esterilizado em 100°C, tração até 30MPa

**LCD**

Placa de pé de cabeça de design única com controlador embutido. LCD de 4,3 polegadas de visor, mostra ângulo em movimento. Fundo pode suportar 100.000 vezes a pressão

**Grade lateral**

Aconchego de trilho lateral com tampão. Controlador incorporado e indicador de ângulo.

**Rodas**


TPR pneu não desgastado depois de correr 30KM, é anti-enrolamento que protege a concha dura para não danificar, unidos formando sem parafusos.

**Freio durável**

Mola do travão manter-se qualificada depois 10.000 vezes travão ininterrupta.

**Indicador de ângulo**

Indicador de ângulo de patente.

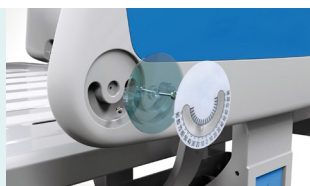**Rodas de pára-choque**

Roda de para-choques patenteada destacável, proteger máximamente a cama e o paciente durante o transporte.

**Segurança**

Siga o padrão de segurança EN60601.

**Gancho de drenagem**

Gancho de drenagem de plástico, móvel.

**Soporte para soro**

Coluna de aço inoxidável com plástico gancho.

**Opcional**

Bateria - Movimento de 18 vezes com rolamento de 100kg, movimento de 130 vezes sem rolamento  
Polo de elevação - Rolamento 765N força!







## CONSTANTE INOVAÇÃO



Desenho



Pesquisa



Fabricação



Manutenção



Serviço



## FILIAIS EM TODO MUNDO

### USA

**Saikang Medical Technology, Inc.**  
17800 Castleton St Ste 180,  
City of Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

### United Kingdom

**UK Healthward International Ltd.**  
Dept. 111, 196 High Road Wood  
Green, N22 8HH, London.  
Tel.: +44 2032399738

### Russia

**Saikang Medical Russia LLC**  
Truda 174,  
454080 Chelyabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

### East Africa

**Saikang Medical Solutions Ltd.**  
Viraj Complex Unit 3, Mombasa  
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenya.  
Tel.: +254 733 704 690

### Middle East

**Saikang Medical Supplies LLC**  
X22-S03 England Cluster,  
International City, Dubai.  
United Arab Emirates.  
Tel.: +20 128 8962497

# SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 📞 24/7

✉ sales@chinasaikang.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue