



SKB041-3S

HYDRAULIQUE
PATIENT
CHARIOT

Code d' enregistrement: SKM-G



SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

SKB041-3S

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS



Paramètres techniques

- Taille externe(LxW): 2150×790mm
- Réglage de la hauteur de la table : 635-895mm
- Réglage de la plaque arrière : 0-60° (±10°)

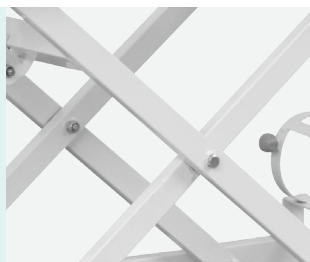
Configuration technique

- Pompe hydrolique 1 pc
- Ressort de l'air 1 pc
- Garde-corps en acier inoxydable 1 set
- Poignée de poussée 1 set
- Roue de pare-chocs murale 4 pcs
- Pédale 2 pcs
- Roulettes 5" avec frein 4 pcs
- Support de bouteilles d'oxygène 1 pc
- Bassin à déchets 1 pc
- Poteau IV 1 pc
- Matelas d'une épaisseur de 60 mm 1 pc



Matériau en métal

Baosteel de Fortune Global 500
Panasonic Robotic assure une
soudure complète à 360°.

**Peinture**

Peinture époxy 11 procédés, test
ASTM antibactérien, épaisseur de
peinture 0,12 mm, brillance 60°. La
peinture peut résister à un impact de
50 kg.

**Chariot patient
multifonctionnel**

Chariot multifonctionnel, qui peut
être séparé en deux parties : brancard
et chariot.
Le brancard à quatre roues peut être
utilisé et déplacé individuellement.

**Roue de pare-chocs**

Roue de pare-chocs amovible, max.
protéger le lit et le patient pendant le
transport.

**Rambarde**

Garde-corps pliable en acier
inoxydable, pas de rouille, facile à
nettoyer.

**Pompes hydrauliques**

Pompe hydraulique de marque
américaine, offrant un support solide
pour les fonctions de réglage de la
hauteur.

**Roulettes**

Quatre roulettes couvertes de 5
pouces de diamètre, toutes avec
freins.

**Poteau IV**

Poteau SS IV complet, portant 15 kg

**Porte-bouteille d'oxygène**

Porte-bouteille d'oxygène, capacité
de charge : 15KG.

**Bassin en acier inoxydable**

Équipé d'un bassin d'égout en acier
inoxydable et d'autres accessoires
divers.

**Le matelas**

Mattress étanche, pratique pour le
transfert du patient.





UNE INNOVATION
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES
DANS LE MONDE ENTIER

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ sales@chinasaikang.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue