



Grace Care series

D8d

MULTIFONCTIONNEL LIT ÉLECTRIQUE

Registration code: SKD-C




SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

D8d

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

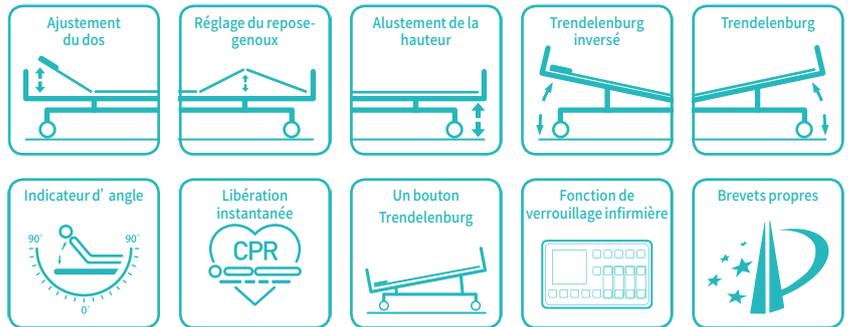

Paramètres techniques

▪ Dimensions extérieures (LxW):	2280x1090 mm
▪ taille du matelas:	1925x900 mm
▪ Charge de travail sûre:	250 kg
▪ Réglage en hauteur:	435-725 mm
▪ Réglage du dossier:	0-75° (±10°)
▪ Réglage du repose-genoux:	0-35° (±10°)
▪ Trendelenburg inversé:	0-12°
▪ Trendelenburg:	0-12°
▪ Indicateur d'angle:	0-90°
▪ Tension et fréquence:	100-240 V · 50/60 Hz
▪ Branchez au besoin (qualité hospitalière)	



Configuration technique

<input checked="" type="checkbox"/> CPR manuelle	
<input checked="" type="checkbox"/> Un bouton pour arrêter	
<input checked="" type="checkbox"/> Un bouton Trendelenburg	
<input checked="" type="checkbox"/> Système de verrouillage des infirmières	
<input checked="" type="checkbox"/> Indicateur d'angle pour la position du dossier et du Trendelenburg	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Moteur linéaire	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Roulettes doubles latérales de 5", système de verrouillage central	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Membre latéral ABS avec panneau de commande intégré	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Tête de lit ABS avec panneau de commande LCD intégré	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> φ85mm roue tampon murale	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Prise de suspension	2 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Poteau IV	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Prévision du poteau IV	4 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Crochet de drainage	2 pcs.
<input checked="" type="checkbox"/> Pédale de verrouillage centralisé	2 pcs.

Optionnel

<input type="checkbox"/> CPR électrique	
<input type="checkbox"/> Système de pesage LCD	
<input type="checkbox"/> Extension du lit de la rivière	
<input type="checkbox"/> Batterie de secours	
<input type="checkbox"/> Position cardiaque	
<input type="checkbox"/> Surface du lit ABS	
<input type="checkbox"/> Surface du lit à rayons X	
<input type="checkbox"/> Poteau de singe	
<input type="checkbox"/> Balkan Tractor	
<input type="checkbox"/> Roue directionnelle	
<input type="checkbox"/> Matelas en mousse de base (12 cm d'épaisseur)	
<input type="checkbox"/> Matelas en mousse anti-escarres (14 cm d'épaisseur)	
<input type="checkbox"/> Bouteille d'oxygène verticale	
<input type="checkbox"/> Barre de levage à bras unique	
<input type="checkbox"/> Plateau utilitaire	

Conception

Le panneau de pied de tête extra long et haut, avec un design arrondi, procure une sensation de confort aux patients

**Plateforme de lit**

Estampage de la plate-forme de formation, surface lisse sans cicatrice de soudage, charge de 250 kg. Option plateforme ABS et plateforme en résine translucide aux rayons X

**Soudage | Cadre de lit**

Panasonic Robotic assure Marquage lisse à 360° Sommier solide en plateau rotatif estampé de 5,0 mm

**Moteur électrique**

Moteur américain, avec norme UL / ROHS / EN. Bruit inférieur à 50 dB, avec un mouvement à vie de 20 000 fois.

**Acier | Peinture**

Baosteel de Fortune Global 500, 11 Process peinture époxy, test ASTM antibactérien, épaisseur de la peinture 0,12 mm, luminosité 60°, la peinture peut résister à un impact de 50 kg.

**Plastique**

Le plastique environnemental peut être stérilisé à une tension de 100 °C, jusqu'à 30 Mpa

**LCD**

Écran LCD de 4,3 pouces, montre l'angle de déplacement. Buttom peut supporter 100000 fois de pression

**Rail latéral**

Rails latéraux arrimés et tampons, contrôleurs intégrés et indicateurs d'angle.

**Roulettes**

TPR tire no worn out after running 30KM, save anti-winding hard shell, united forming without bolts Pass Dynamic test: Bearing 120kg run 30KM and pass obstacles 500time

**Système de freinage**

Le ressort de frein reste qualifié après 10 000 fois une pause ininterrompue.

**Indicateur d'angle**

Indicateur d'angle de brevet

**Roue tampon**

Les roues tampons brevetées sont amovibles pour une protection maximale du lit et du patient pendant le transport.

**Sécurité**

Norme de sécurité IEC60601.

**Crochets de drainage**

Crochet de drainage en plastique, mobile

**Poteau IV**

Full SS IV pole, bearing 15kg

**Facultatif**

Batterie: 18 mouvements avec roulements de 100 kg et 130 mouvements sans roulements. Comité de contrôle des infirmières. Support de rangement sous le tiroir de pédale. Entreposer le panneau de commande





UNE INNOVATION
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES
DANS LE MONDE ENTIER

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ sales@chinasaikang.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue