



V6k

LIT ÉLECTRIQUE

Code d'enregistrement: SKD-C



SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

V6k

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS



Paramètres techniques

▪ Taille externe (Lxlxh) :	2130x995x420-730mm
▪ Plate-forme de matelas:	1925x900 mm
▪ Charge de travail sûre:	200 kg
▪ Réglage du dossier :	0-70° (±5°)
▪ Réglage repose-genoux:	0-46° (±5°)


Optionnel

- Batterie de secours
- Rallonge de lit
- Infirmière contrôleur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Fonction d'autorégression (section arrière)
- Veilleuse
- RCP manuelle
- Plate-forme de matelas translucide aux rayons X (section arrière)
- Étagère utilitaire
- Support de trapèze/poteau

Technical configuration

<input checked="" type="checkbox"/> Moteur linéaire	3 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Télécommande	1 pc
<input checked="" type="checkbox"/> Roulettes couvertes de 5"	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Rail latéral pliable	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Extrémités de lit en PP avec verrouillage sécurisé avec roues de pare-chocs Ø65	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Plate-forme de lit en PP avec retenue de matelas intégrée	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> IV Pole 4 crochets	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Prévion du pôle IV	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Crochet de drainage	2 pcs

Couleur facultative (MOQ100pcs- changement de couleur)

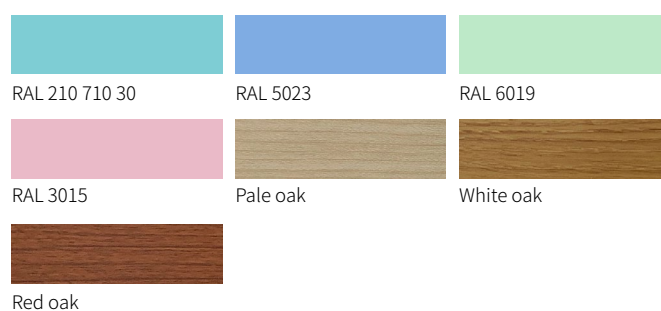

Contrôle de qualité

Les patients en réadaptation médicale doivent souvent relever d'énormes défis. De nombreuses personnes souffrant de maladies ou d'accidents sont confrontées à une reconversion de leur esprit et de leur corps et doivent s'adapter à un nouvel environnement. Dans ce cas, une atmosphère positive apporterait une aide décisive. Les lits et le mobilier hospitaliers doivent apporter le meilleur soutien aux patients et aux infirmières. Dans ce contexte, Saikang se consacre à fournir des solutions de soins médicaux et des choix parfaits pour les institutions médicales et les centres de réhabilitation, afin d'aider les patients à se rétablir rapidement ou à long terme.



Design

La conception unique sans germes répond au strict contrôle d'infections des hôpitaux. Tête et pied du lit en PP sans soudure et la plate-forme assurent une stérilisation instantanée et suffisante.



Acier | Soudage

Baosteel du Fortune Global 500. Panasonic Robotic assure une soudure lisse complète à 360°.



Plastique | Peinture

Plastique environnemental peut être stérilisé à 100°C, résistant à la traction jusqu'à 30MPa.

11 Processus de peinture époxy, Test ASTM anti-bactérien, épaisseur de la peinture est de 0,12 mm, la luminosité est de 60°, la peinture peut résister à un impact de 50 kg.



Moteur linéaire

Moteur linéaire, avec les normes UL /ROHS/EN. Bruit inférieur à 50 dB, avec une durée de vie équivalente à 20 000 fois le mouvement.

Accessoires



Plateforme

Plate-forme de lit intégrée en PP, adoptant une technologie de fabrication avancée.

Plate-forme à 4-5 sections, permettant une installation indépendante et un entretien facile.

Agrandissement de la zone d'assise lorsque le dossier est relevé, offrant plus de confort aux patients.

Réduit la dépression de l'éponge au niveau du panneau du siège.



Roulettes

Roulettes couvertes de 5". Pneu TPR non usé après avoir parcouru 10 km.

Coque rigide anti-enroulement, assemblage uni sans boulons.

Réussi le test dynamique : Peut franchir les obstacles 40 000 fois, sous la charge standard de 200 kg de l'ensemble du lit.

Tête et pied de lit

Matériau PP frais LG Chem, type Plug-in Équipé de la roue de pare-chocs, diamètre 65 mm, empêchant les collisions

**Retenu de matelas**


Arret matelas intégrée à la plateforme des deux côtés de la section du dos et des jambes, avec une bordure de 33 mm de hauteur.

**Crochets de drainage**


Rails latérales en alliage d'aluminium, 6 barres, de type replié avec serrure de sécurité.

**Roue pare-chocs murale**

Pare-chocs d'angle horizontal à la périphérie la plus extérieure du lit pour protéger le lit et le mur.

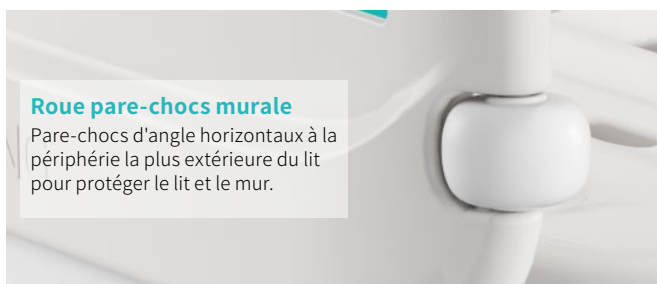**Crochets de drainage**

Crochet de drainage en plastique, mobile, 30*50mm.

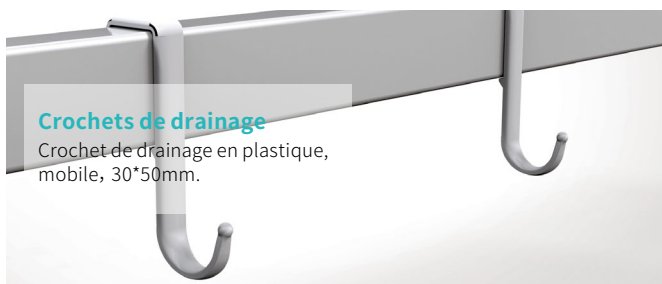
**Pôle IV**

Poteau SS IV, il peut supporter 15kg.



Réglage du dossier

75°

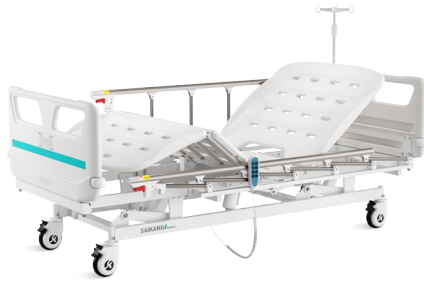

Réglage repose-genoux

46°



Alustement de la hauteur

420-730 mm



UNE INNOVATION CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue