



V4v5c

LIT MANUEL

Code d' enregistrement: SK-CD1




SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

V4v5c

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

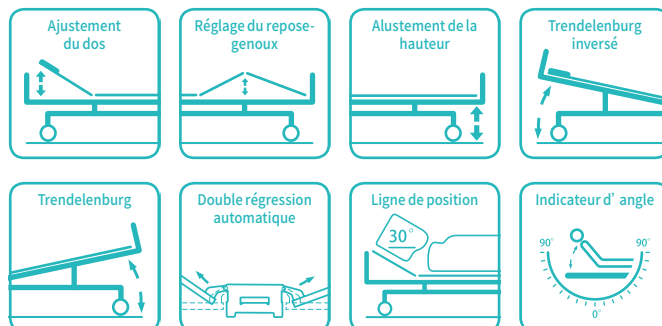

Paramètres techniques

▪ Dimensions extérieures (LxlxH)	2130x1025x475-725 mm±10mm
▪ Plate-forme de matelas	1925x900 mm
▪ Charge maximale d'utilisation	250 kg
▪ Réglage du dossier	0-73° (±5°)
▪ Réglage du repose-genoux	0-38° (±5°)
▪ Réglage de la hauteur	475-725 mm±10mm
▪ Trendelenburg et Trendelenburg inversé	0-12°


Configuration technique

<input checked="" type="checkbox"/> Manivelles manuelles	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Roulettes couvertes de 5"	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur supplémentaire du rail latéral en PP	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Extrémités de lit en PP avec verrouillage sécurisé avec roues de pare-chocs Ø65	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Plate-forme de lit en PP avec retenue de matelas intégrée	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Indicateur d'angle breveté pour la position du dossier	2 set
<input checked="" type="checkbox"/> IV Pole 4 crochets	1 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Prévision du pôle IV	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Crochet de drainage	2 pcs


Optionnel

- Étagère utilitaire
- Support de trapèze/poteau

Couleur facultative (MOQ100pcs- changement de couleur)

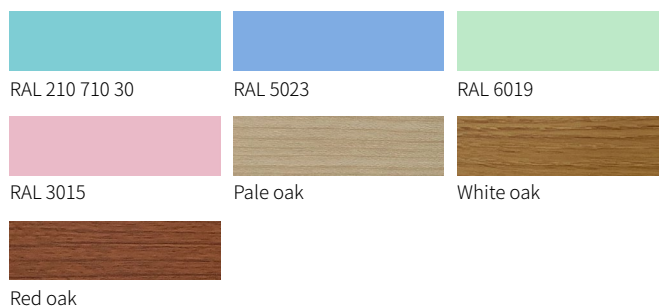


Présentation des fonctions

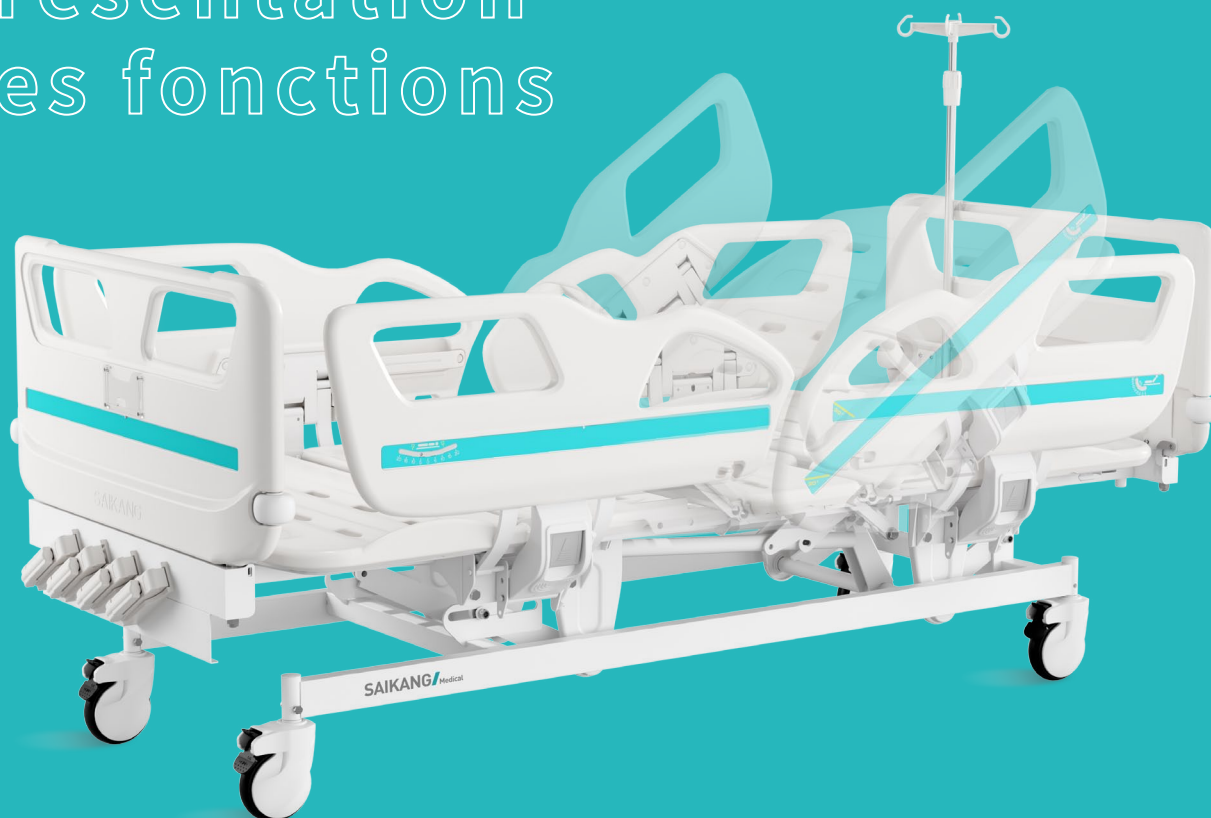


Charge maximale d'utilisation

250 kg

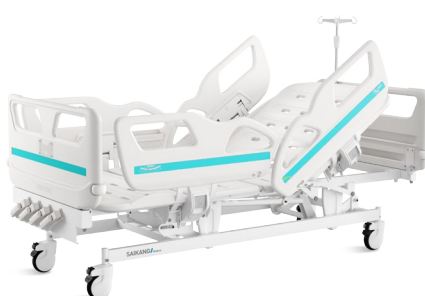

Réglage du dossier

73°

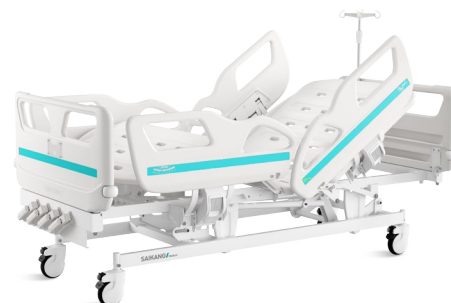

Réglage du repose-genoux

38°



Dimensions extérieures

475-725 mm



Trendelenburg

12°



Trendelenburg inversé

12°

Contrôle de qualité

Les patients en réadaptation médicale doivent souvent relever d'énormes défis. De nombreuses personnes souffrant de maladies ou d'accidents sont confrontées à une reconversion de leur esprit et de leur corps et doivent s'adapter à un nouvel environnement. Dans ce cas, une atmosphère positive apporterait une aide décisive. Les lits et le mobilier hospitaliers doivent apporter le meilleur soutien aux patients et aux infirmières. Dans ce contexte, Saikang se consacre à fournir des solutions de soins médicaux et des choix parfaits pour les institutions médicales et les centres de réhabilitation, afin d'aider les patients à se rétablir rapidement ou à long terme.



Design

La conception unique sans germes répond au strict contrôle d'infections des hopitaux. Tête et pied du lit en PP sans soudure et la plate-forme assurent une stérilisation instantanée et suffisante.




Acier | Soudage

Baosteel du Fortune Global 500. Panasonic Robotic assure une soudure lisse complète à 360°.



Peinture

11 Processus de peinture époxy, Test ASTM anti-bactérien, épaisseur de la peinture est de 0,12 mm, la luminosité est de 60°, la peinture peut résister à un impact de 50 kg.

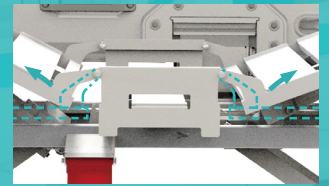

Auto-régression

Lors du repositionnement du dossier et repose-cuisses, le lit "V" fait en sorte que la plaque arrière recule de 10cm ce qui a pour effet de minimiser la pression et forces de cisaillement au niveau de la région du bassin des patients. Ce qui engendre une importante réduction du développement des escarres.

Accessories



Plateforme

Plate-forme de lit intégrée en PP, adoptant une technologie de fabrication avancée.

Plate-forme à 4-5 sections, permettant une installation indépendante et un entretien facile.

Agrandissement de la zone d'assise lorsque le dossier est relevé, offrant plus de confort aux patients.

Réduit la dépression de l'éponge au niveau du panneau du siège.



Roulettes

Roulettes couvertes de 5". Pneu TPR non usé après avoir parcouru 10 km. Coque rigide anti-enroulement, assemblage uni sans boulons.

Réussi le test dynamique : Peut franchir les obstacles 40 000 fois, sous la charge standard de 200 kg de l'ensemble du lit.

Tête et pied de lit

Matériau PP frais LG Chem, type Plug-in Équipé de la roue de pare-chocs, diamètre 65 mm, empêchant les collisions

**Angle Indicator**

With built-in angle indicator, it clearly show back-rest and trendelenburg position.

**Côté de lit**

Barrière latérale escamotable avec tampon intégré, la poignée intégrée facilite au patient de se lever/sortir du lit.

**Crochets de drainage**

Crochet de drainage en plastique intégré à l'intérieur des rails latéraux.

**Retenue de matelas**

Arret matelas intégrée à la plateforme des deux côtés de la section du dos et des jambes, avec une bordure de 33 mm de hauteur.

**Crochets de drainage**


Crochet de drainage en plastique intégré à l'intérieur des rails latéraux.

**Crochets de drainage**

Crochet de drainage en plastique, mobile, 30*50mm.

**Pôle IV**

Poteau SS IV, il peut supporter 15kg.

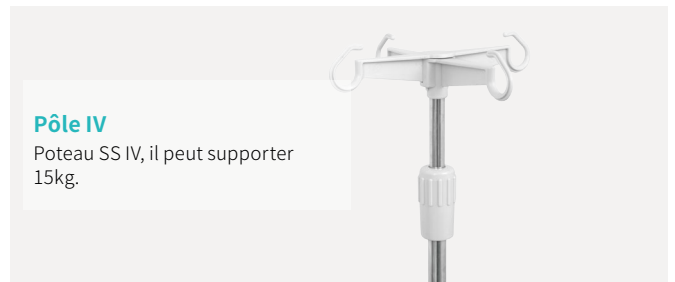



UNE INNOVATION CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc
W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd
Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd
Sala Thammassop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited
DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'
454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC
Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue