



V6v5c

LIT ÉLECTRIQUE

Code d' enregistrement: SKD-C




SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

V6v5c

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

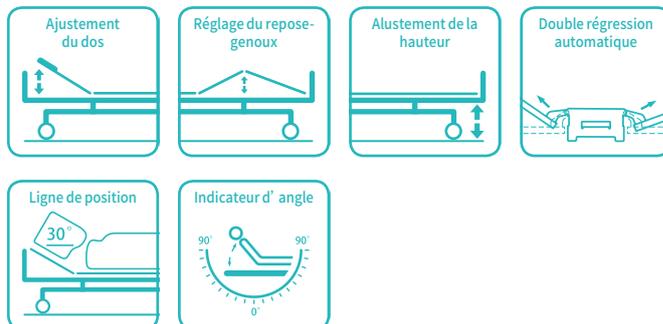

Paramètres techniques

Taille externe (LxWxH)	2085*1025*430-740mm±10mm
Plate-forme de matelas	1925x900 mm
Charge de travail sûre	250 kg
Réglage du dossier	0-75° (±5°)
Réglage repose-genoux	0-46° (±5°)
Réglage de la hauteur	430-740 mm ± 10 mm

Optionnel

- Batterie de secours
- Rallonge de lit
- Panneau de contrôle intégré
- Infirmière Contrôleur
- Coupure automatique à 30°
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Veilleuse
- RCP manuelle
- Plate-forme de matelas translucide aux rayons X (section arrière)
- Étagère utilitaire
- Support de trapèze/poteau


Configuration technique

<input checked="" type="checkbox"/> Moteur linéaire	3pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Télécommande	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Roulettes rigides de 5"	4pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur supplémentaire du rail latéral en PP	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Extrémités de lit en PP avec verrouillage sécurisé avec roues de pare-chocs Ø65	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Plate-forme de lit en PP avec retenue de matelas intégrée	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Indicateur d'angle breveté pour la position du dossier	2pcs
<input checked="" type="checkbox"/> IV Pole 4 crochets	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Prévision du pôle IV	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Crochet de drainage	2 pcs

Couleur facultative (MOQ100pcs- changement de couleur)




Présentation des fonctions

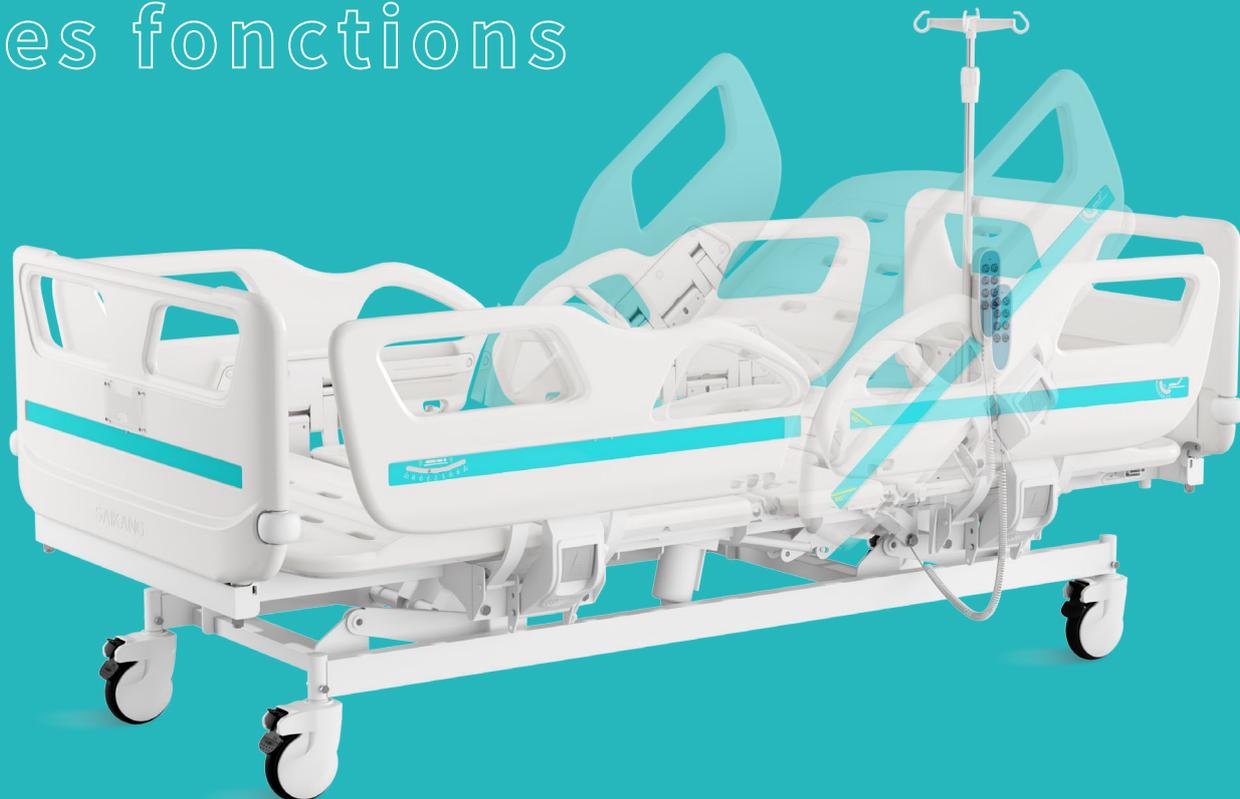

Charge de travail sûre

250_{kg}

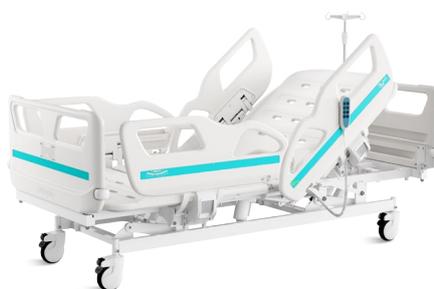

Réglage du dossier

75°



Réglage repose-genoux

46°



Taille externe

430-740_{mm}

Contrôle de qualité

Les patients en réadaptation médicale doivent souvent relever d'énormes défis. De nombreuses personnes souffrant de maladies ou d'accidents sont confrontées à une reconversion de leur esprit et de leur corps et doivent s'adapter à un nouvel environnement. Dans ce cas, une atmosphère positive apporterait une aide décisive. Les lits et le mobilier hospitaliers doivent apporter le meilleur soutien aux patients et aux infirmières. Dans ce contexte, Saikang se consacre à fournir des solutions de soins médicaux et des choix parfaits pour les institutions médicales et les centres de réhabilitation, afin d'aider les patients à se rétablir rapidement ou à long terme.



Design

La conception unique sans germes répond au strict contrôle d'infections des hôpitaux. Tête et pied du lit en PP sans soudure et la plate-forme assurent une stérilisation instantanée et suffisante.




Acier | Soudage

Baosteel du Fortune Global 500. Panasonic Robotic assure une soudure lisse complète à 360°.



Peinture

11 Processus de peinture époxy, Test ASTM anti-bactérien, épaisseur de la peinture est de 0,12 mm, la luminosité est de 60°, la peinture peut résister à un impact de 50 kg.

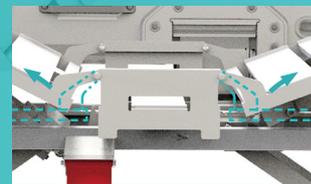

Auto-régression

Lors du repositionnement du dossier et repose-cuisses, le lit "V" fait en sorte que la plaque arrière recule de 10cm ce qui a pour effet de minimiser la pression et forces de cisaillement au niveau de la région du bassin des patients. Ce qui engendre une importante réduction du développement des escarres.



Moteur linéaire

Moteur linéaire, avec les normes UL /ROHS/EN. Bruit inférieur à 50 dB, avec une durée de vie équivalente à 20 000 fois le mouvement.



Cadre de lit

Base de lit solide constituée d'une plaque rotative estampée de 5,0 mm.



Acier | Soudage

Baosteel du Fortune Global 500. Panasonic Robotic assure une soudure lisse complète à 360°.

Accessories



Plateforme

Plate-forme de lit intégrée en PP, adoptant une technologie de fabrication avancée.



Roulettes

Roulettes couvertes de 5". Pneu TPR non usé après avoir parcouru 10 km. Coque rigide anti-enroulement, assemblage uni sans boulons.

Tête et pied de lit

Matériau PP frais LG Chem, type Plug-in Équipé de la roue de pare-chocs, diamètre 65 mm, empêchant les collisions

**Angle Indicator**

With built-in angle indicator, it clearly show back-rest and trendelenburg position.

**Côté de lit**

Barrière latérale escamotable avec tampon intégré, la poignée intégrée facilite au patient de se lever/sortir du lit.

**Télécommande**


Panneau de commande satellite pour infirmières : câble spiralé flexible pour une mobilité facile et un fonctionnement dans la position optimale. L'infirmière peut contrôler toutes les fonctions nécessaires.

**Crochets de drainage**

Crochet de drainage en plastique intégré à l'intérieur des rails latéraux.

**Drainage Hooks**

Plastic drainage hook integrated inside the siderails.

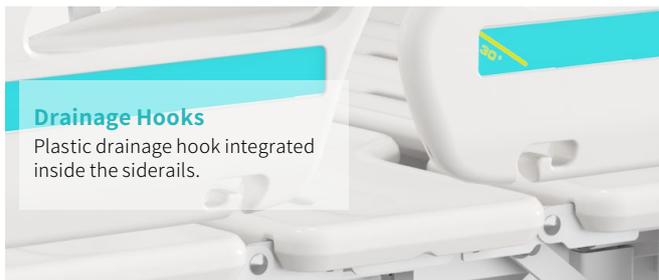**Retenue de matelas**

Arret matelas intégrée à la plateforme des deux côtés de la section du dos et des jambes, avec une bordure de 33 mm de hauteur.

**Pôle IV**

Poteau SS IV, il peut supporter 15kg.

**Crochets de drainage**

Crochet de drainage en plastique, mobile, 30*50mm.





UNE INNOVATION CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammassop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue