



V6w5c

LIT ÉLECTRIQUE

Code d'enregistrement: SKD-C




SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

V6w5c

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

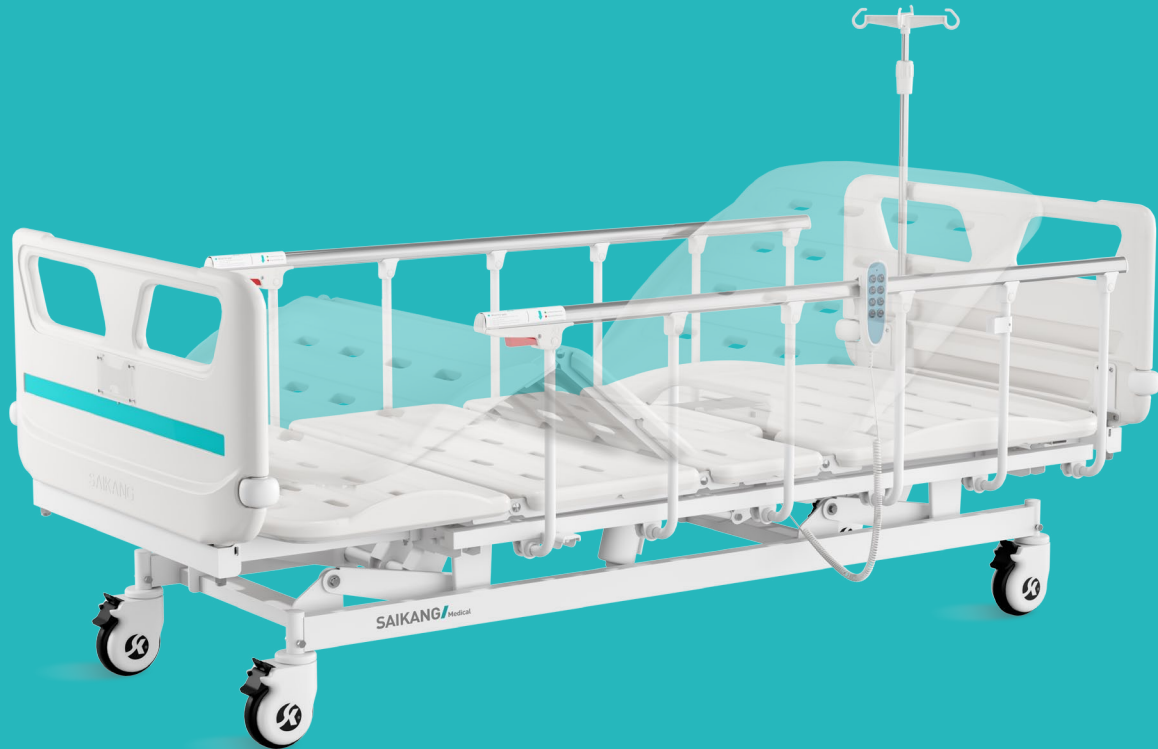

Paramètres techniques

▪ Taille externe (LxWxH)	2085x1020x420-730 mm±10mm
▪ Plate-forme de matelas	1925x900 mm
▪ Charge de travail sûre	200 kg
▪ Réglage du dossier	0-75° (±5°)
▪ Réglage repose-genoux	0-46° (±5°)


Optionnel

- Batterie de secours
- Rallonge de lit
- Infirmière contrôleur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Fonction d'autorégression (section arrière)
- Veilleuse
- RCP manuelle
- Plate-forme de matelas translucide aux rayons X (section arrière)
- Étagère utilitaire
- Support de trapèze/poteau

Configuration technique

<input checked="" type="checkbox"/> Moteur linéaire	3 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Télécommande	1 pc
<input checked="" type="checkbox"/> Roulettes couvertes de 5"	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Rail latéral pliable	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Extrémités de lit en PP avec verrouillage sécurisé avec roues de pare-chocs Ø65	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Plate-forme de lit en PP avec retenue de matelas intégrée	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> IV Pole 4 crochets	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Prévision du pôle IV	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Crochet de drainage	2 pcs

Couleur facultative (MOQ100pcs- changement de couleur)

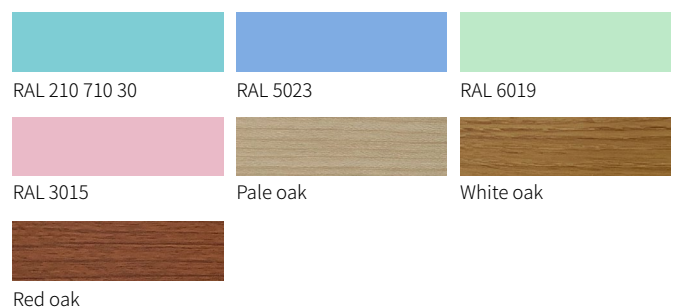

Contrôle de qualité

Les patients en réadaptation médicale doivent souvent relever d'énormes défis. De nombreuses personnes souffrant de maladies ou d'accidents sont confrontées à une reconversion de leur esprit et de leur corps et doivent s'adapter à un nouvel environnement. Dans ce cas, une atmosphère positive apporterait une aide décisive. Les lits et le mobilier hospitaliers doivent apporter le meilleur soutien aux patients et aux infirmières. Dans ce contexte, Saikang se consacre à fournir des solutions de soins médicaux et des choix parfaits pour les institutions médicales et les centres de réhabilitation, afin d'aider les patients à se rétablir rapidement ou à long terme.



Design

La conception unique sans germes répond au strict contrôle d'infections des hopitaux. Tête et pied du lit en PP sans soudure et la plate-forme assurent une stérilisation instantanée et suffisante.



Acier | Soudage

Baosteel du Fortune Global 500. Panasonic Robotic assure une soudure lisse complète à 360°.



Peinture

11 Processus de peinture époxy, Test ASTM anti-bactérien, épaisseur de la peinture est de 0,12 mm, la luminosité est de 60°, la peinture peut résister à un impact de 50 kg.

Accessories



Plateforme

Plate-forme de lit intégrée en PP, adoptant une technologie de fabrication avancée.



Roulettes


Roulettes couvertes de 5". Pneu TPR non usé après avoir parcouru 10 km. Coque rigide anti-enroulement, assemblage uni sans boulons.

Tête et pied de lit

Matériau PP frais LG Chem, type Plug-in Équipé de la roue de pare-chocs, diamètre 65 mm, empêchant les collisions

**Roue pare-chocs murale**

Pare-chocs d'angle horizontal à la périphérie la plus extérieure du lit pour protéger le lit et le mur.

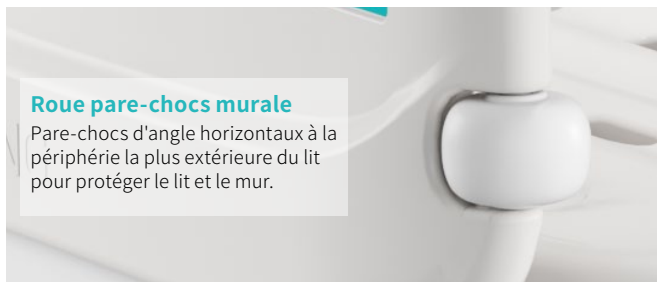**Tête et pied de lit**

Garde-corps pliable en forme de L (brevet), tube courbé, installation solide, 0 secousses, anti-pincement, assure la sécurité du patient.

**Retenue de matelas**


Arrêt matelas intégrée à la plateforme des deux côtés de la section du dos et des jambes, avec une bordure de 33 mm de hauteur.

**Télécommande**

Panneau de commande satellite pour infirmières : câble spiralé flexible pour une mobilité facile et un fonctionnement dans la position optimale. L'infirmière peut contrôler toutes les fonctions nécessaires.

**Crochets de drainage**

Crochet de drainage en plastique, mobile, 30*30mm.

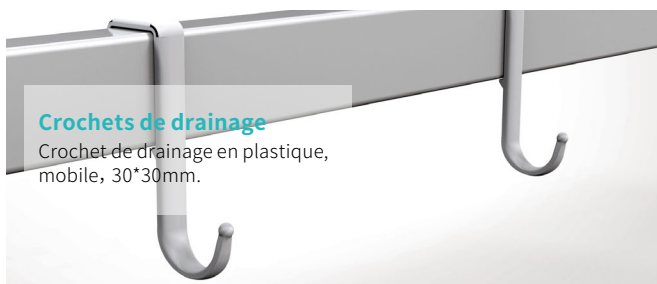
**Pôte IV**

Poteau SS IV, il peut supporter 15kg.



Réglage du dossier

75°

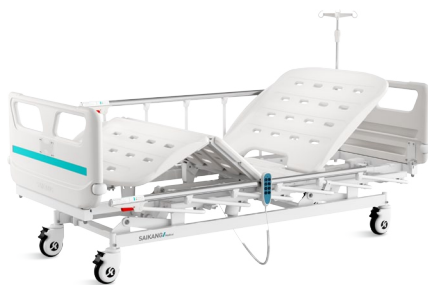

Réglage repose-genoux

46°



Alustement de la hauteur

420-730_{mm}





UNE INNOVATION CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc
W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd
Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd
Sala Thammassop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited
DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'
454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC
Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue