



SKR058-ET

CHARIOT D'URGENCE



SAIKANG / Medical


Une vie
plus saine

SKR058-ET

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

Matériel

Le matériau ABS est un plastique technique innovant. Antibactérien, résistant à l'humidité, anti-corrosion, résistant à l'usure, non toxique et sans goût, ne rouille jamais. Lavable, nettoyage facile.

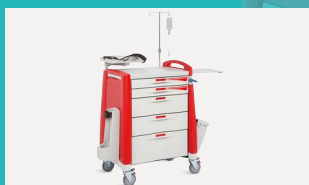

Conception

La conception et la production globales sont exquises, le style et la correspondance des couleurs sont raisonnables, l'installation est simple et la structure est stable et durable.



Tiroir

Cinq couches de tiroirs, plus grande capacité, rangement classifié plus pratique.



Compartment à tiroirs

Il y a des grilles de médecine acrylique transparentes à l'intérieur du tiroir, qui peuvent être utilisées pour classer et placer des médicaments, et les grilles de médecine peuvent être librement combinées.

Paramètres techniques

▪ Dimensions	790W X 610D X 1000H mm
▪ Support de défibrillateur	380×340mm
▪ Tableau de travail	340×250mm
▪ Planche RCR	475 × 595 × 8.5mm
▪ Taille d'emballage	820X650x1150 mm
▪ Poids du produit	65 Kg
▪ Roulette	5" deux roulettes avec frein, deux sans frein

Configuration technique

- Poubelle de 20 litres avec couvercle
- Porte-bouteilles d'oxygène
- Support iv réglable
- Grille de médicaments horizontale et verticale
- Rail coulissant

Accessories


Support IV

Support IV réglable en alliage d'aluminium.



Roulette

En bas, il utilise deux freins silencieux de 5 pouces, anti-enroulement, roulettes silencieuses haut de gamme, permettant un mouvement flexible et une capacité de charge élevée.

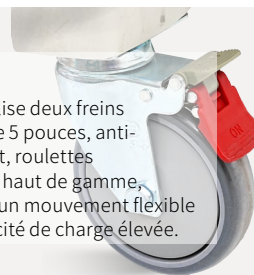

Glissière de tiroir

Le tiroir utilise des glissières d'amortissement silencieuses à trois sections à haute résistance. Lorsque le tiroir est fermé à la distance finale, la pression hydraulique est utilisée pour ralentir la vitesse et réduire la force d'impact, créant un effet de fermeture confortable.



Table de travail

Le dessus de table principal peut avoir un coussin souple remplaçable qui est anti-poussière et facile à nettoyer. Le véhicule est équipé d'un tableau d'écriture coulissant caché qui peut être utilisé pour écrire.



Poignée scellée

Le chariot est équipé d'une poignée scellée, qui peut verrouiller cinq tiroirs en même temps.



Porte-bouteilles d'oxygène

Support de bouteille d'oxygène en ABS sur le côté gauche



Poubelle

Poubelle en ABS à clapet sur le côté droit, Spécification : 20L



Planche RCR

La carte ABS CPR est installée à l'arrière du corps du chariot, qui peut être utilisée pendant le sauvetage par défibrillation.

Taille de la carte CPR : 475 x 595 x 8,5 mm





UNE INNOVATION CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services

SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue